

Seri-coolaris

elastische Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut auf Zinkleim-Basis




Anwendungsgebiet:

Universell einsetzbare und einfach zu modellierende Zinkleim-Kühlbandage für die schnelle und effektive Erste Hilfe. Der längselastische Verband besteht aus einem Mullbindengewebe getränkt in einer Hydrokolloidmatrix mit Natriumalginat und Zinkoxid. Während der Aushärtungsphase ist der Verband durch den hohen Wasseranteil in der Hydrokolloidmatrix ca. 4 Stunden lang sensitiv kühlend. Dieser Effekt kann durch vorherige Lagerung im Kühlschranks verstärkt werden. Besprühen mit Wasser verlängert den Kühleffekt. Nach der Aushärtungsphase erreicht der Verband einen halbstarren Zustand.

Indikation:

- als halbstarrer Stütz- und Entlastungsverband bei Verstauchungen, Muskelzerrungen, Muskelfaserrissen, Prellungen und Sporttraumata der verschiedenen Arten (Sehnen, Muskeln, Bänder und Gelenke)
- zur Kühlung bei Muskel- und Gelenkbeschwerden
- zur Verwendung bei posttraumatische Schwellungen

Kennzeichnung Medizinsymbole

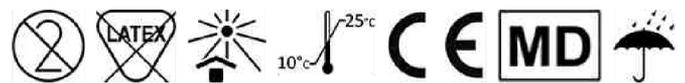

Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
2719326	Seri-coolaris	10cm	5m	19836540	10	weiß <input type="checkbox"/>
2719327	Seri-coolaris	6cm	5m	19836528	10	weiß <input type="checkbox"/>
2719328	Seri-coolaris	8cm	5m	19836534	10	weiß <input type="checkbox"/>