

# schülke -†



hyclick® System: Flaschen mit integrierter Pumpe und passendem hyclick® Spender

Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen für 500 ml und 1.000 ml Flaschen



## So einfach ist sicher!

### Unser Plus:

- Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel
- Optimaler Schutz vor Kontaminationen
- Minimaler Reinigungsaufwand Dank abgerundetem Design
- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 und 3 ml
- Einfache Montage auf schülke- und marktüblichen Wandhalteplatten

### Beschreibung

Einfache Dosierung von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen. Dosierte die benötigten Präparatemengen durch den verstellbaren Dosierhub in Mengen von ca. 1,5 oder 3 ml je Hub.

- Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der Präparate.
- Mit einem Klick sitzt die Flasche im Spender. Ganz einfach, mit einer Hand.

### Produktwechsel

Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen.

### Reinigung und Desinfektion

Der Wandspender lässt sich ohne Werkzeug zerlegen. Glatte und polierte Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung sowie die Desinfektion bspw. mit den mikrozid® universal wipes.

### Betätigungshebel

Kann per Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden.

### Montagehinweise

Standardbefestigung:


- 2 Langlöcher oben und ein Langloch unten.
- Beste statische Befestigung für Präparate-Spender: durch T-Anordnung passend in allen Kachelfugen.

### Die folgenden Produkte sind aktuell in hyclick® Varianten verfügbar\*:


Produkt	Lieferform	Art.-Nr.
 esemtan® wash lotion 1.000 ml	10/ Karton	70000133
 esemtan® wash lotion 500 ml	20/ Karton	70000134
 s&m® wash lotion 1.000 ml	10/ Karton	70000135
 s&m® wash lotion 500 ml	20/ Karton	70000136
 sensiva® wash lotion 1.000 ml	10/ Karton	70000137
 sensiva® wash lotion 500 ml	20/ Karton	70000138
 desderman® 1.000 ml	10/ Karton	70001089
desderman® 500 ml	20/ Karton	70001093
desmano® care 1.000 ml	10/ Karton	70001086
desmano® care 500 ml	20/ Karton	70001085

\* Weitere Produkte folgen in Kürze.

## Abmessungen hyclick®:

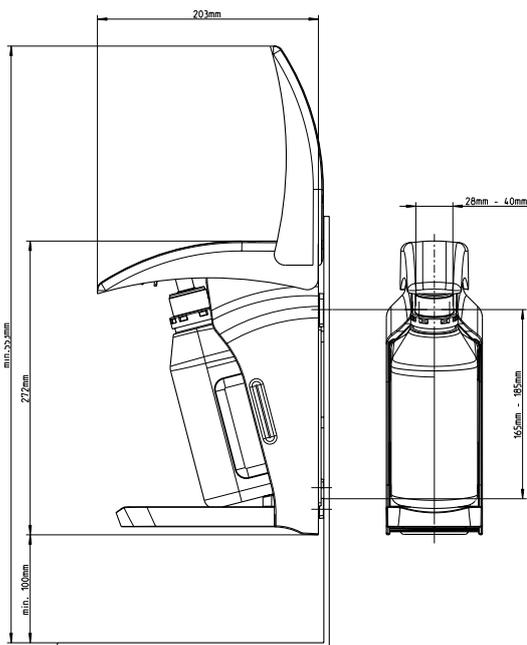

## Abmessungen hyclick® mit 500 ml Adapter:

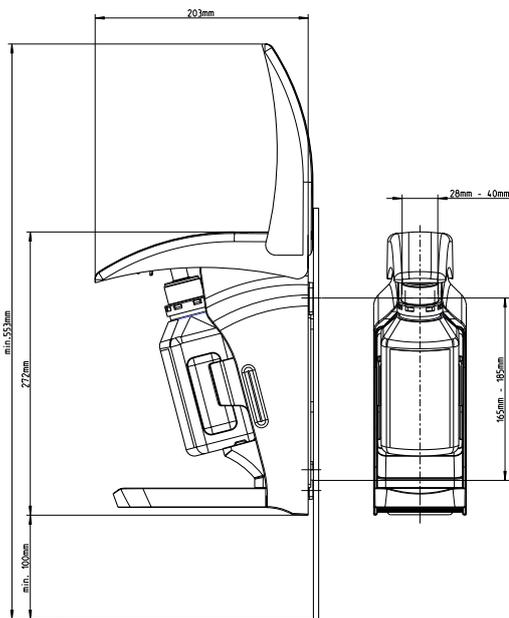


## Lieferformen


	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> hyclick® Präparate-Spender Vario 500 ml / 1000 ml	60000045
<input type="checkbox"/> hyclick® Präparate-Spender 1000 ml	60000036
<input type="checkbox"/> hyclick® 500 ml Adapter	60000035
<input type="checkbox"/> hyclick® Tropfschale	60000037

## Technische Daten

Gebindegröße:	1.000 ml 500 ml mit 500 ml Adapter
Dosierung verstellbar:	ca. 1,5 oder 3 ml
Füllstandskontrolle:	ständig durch transparenten Behälter
Werkstoffe:	ABS-Kunststoff

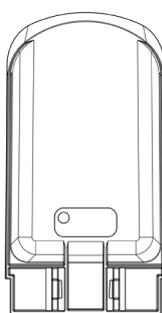


Tropfschale

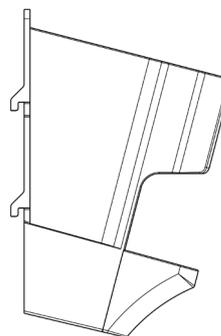

Adapter

## Dosierung verstellbar:

MIN

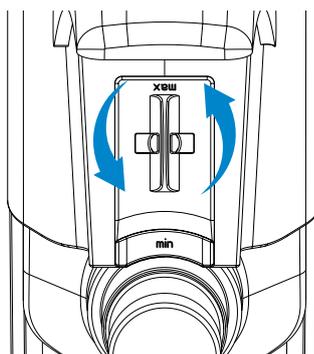

MAX

